


DiaPro®

Ürün Kataloğu




diapro.com.tr

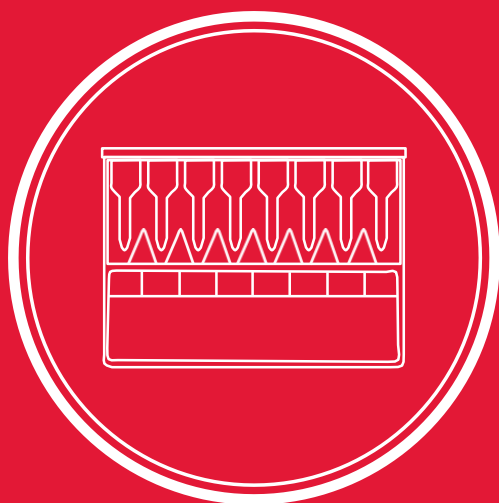

• Jel Santrifügasyon Test Kartları • RBC Hücre Setleri • Yardımcı Solüsyonlar

Across Gel® Forward & Reverse ABO with D_{VI}⁻/D_{VI}⁺

Ref. No: 810201 ▶ 50 Kart

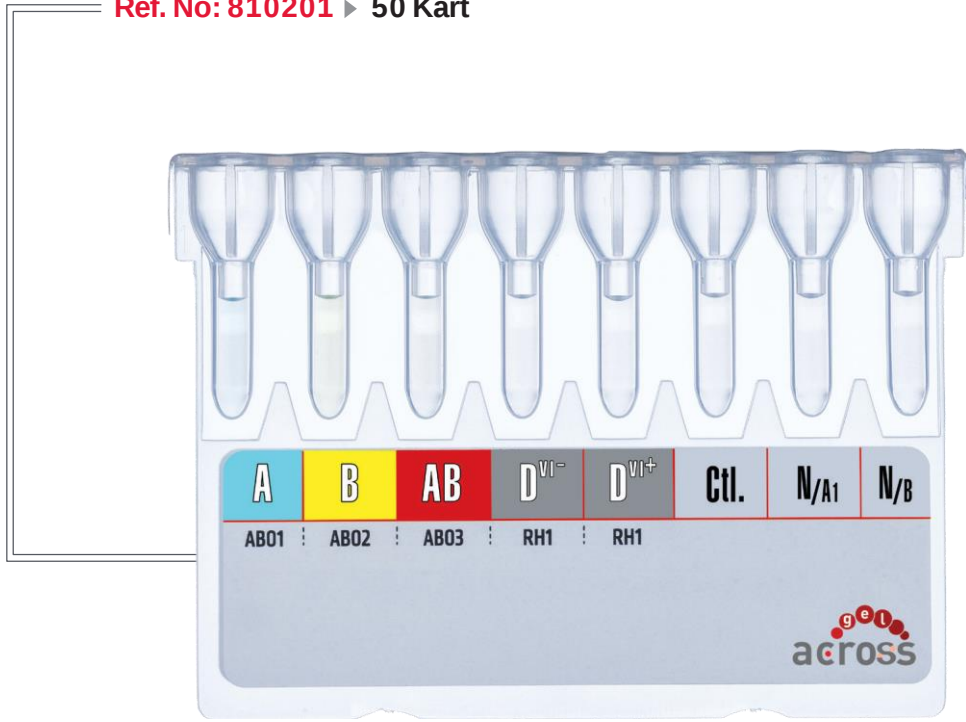

Across Gel® Forward & Reverse ABO with D_{VI}⁻/D_{VI}⁺ Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırma ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

- Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit yüzeyinde olmayan antijene karşı serum/plazmadaki karşıt antikorların, Across RBCA1/B ürünleri ile birlikte tespitini,

- D_{VI}⁻ ve D_{VI}⁺ mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Rh (D) ile Zayıf D/Parsiyel D antijenlerinin tespitini sağlayacaktır.

Forward & Reverse


Geniř test parametreleri
**kolaylık ve zaman
kazandırır!**



Across Gel® ABO Typing

Ref. No: 810208 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811208 ▶ 10 Kart

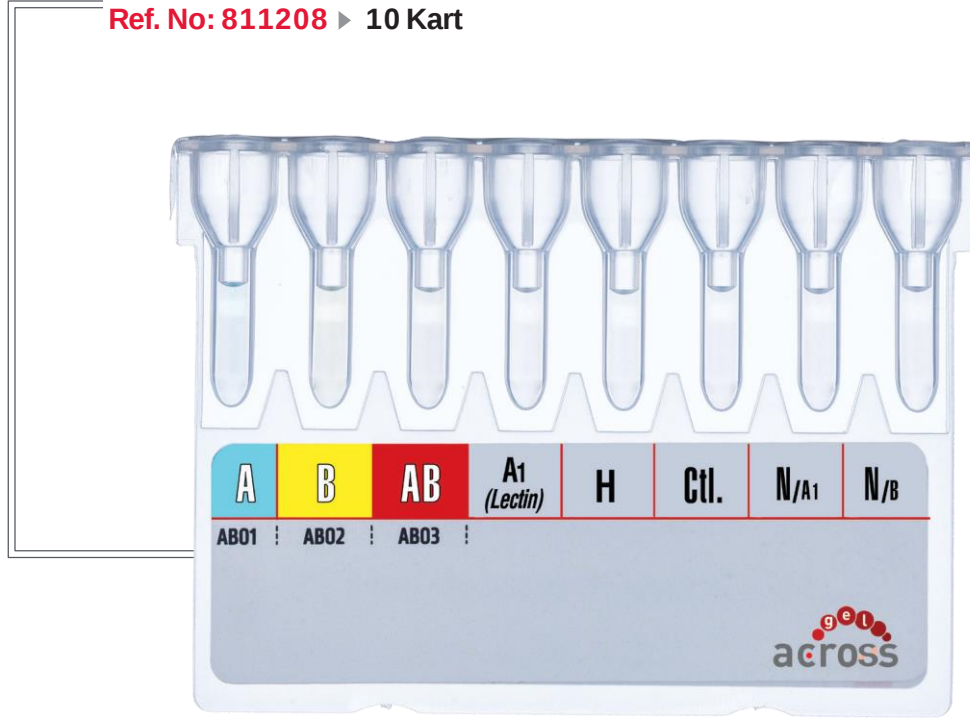


Across Gel® ABO Typing

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB ile Lectin A₁, AntiH mikrotüpleri içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırmada ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

- Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer alan N/A₁ ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit yüzeyinde olmayan antijene karşı serum/plazmadaki karşıt antikorların, Across RBCA1/B ürünleri ile birlikte tespitini sağlayacaktır.


ABO Typing

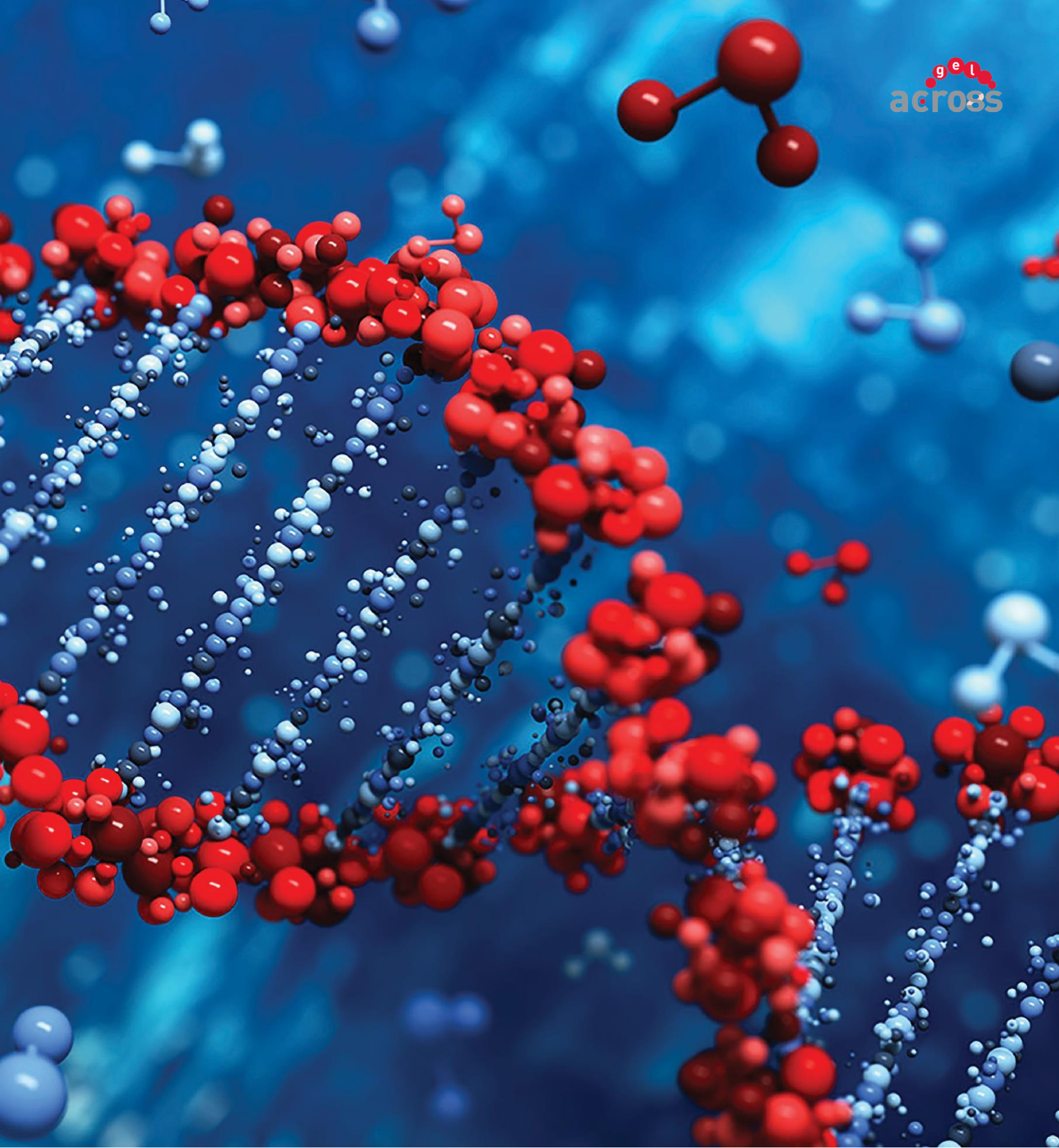

Across Gel® Newborn

Ref. No: 810213 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811213 ▶ 10 Kart

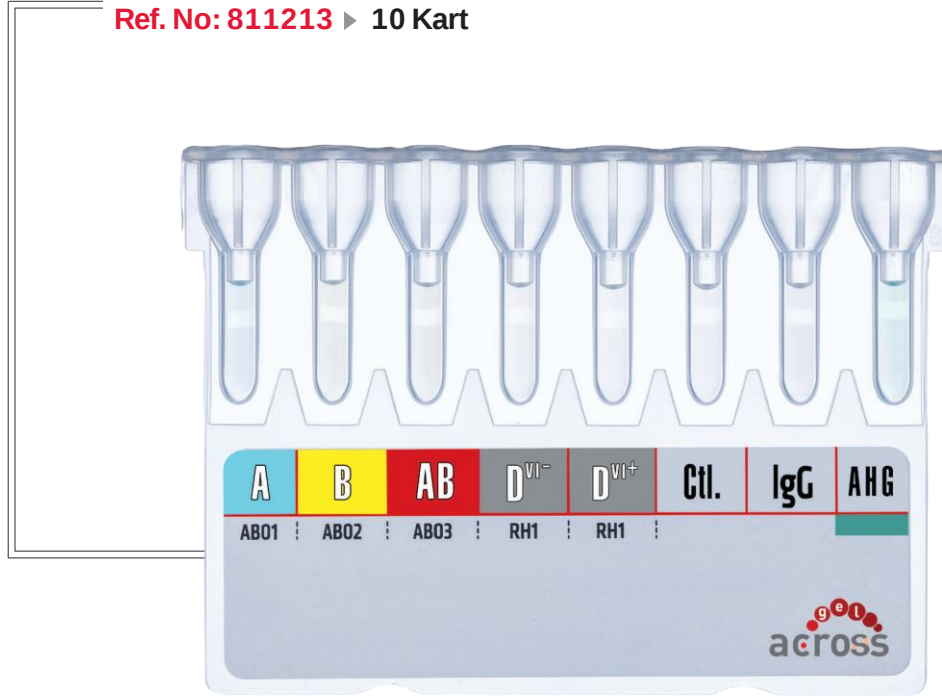

Across Gel®Newborn

Kartının sağlamış olduđu geniş test parametreleri doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırma ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

- D_{VI}⁻ ve D_{VI}⁺ mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlarda Rh (D) ve Zayıf D/Parsiyal D antijenlerinin tespiti ile Rh (D) uyumsuzluklarının tespitinde bir adım daha önde olmanızı sağlar.

- Monospesifik IgG ve Polispesifik AHG mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlara gereken önemi veriyoruz.


Newborn

Yenidoğan eriřkinin küçüğü deęildir.
Onlara gerekli özeni göstermeliyiz.



Across Gel® Cross Match

Ref. No: 810217 ▶ 50 Kart

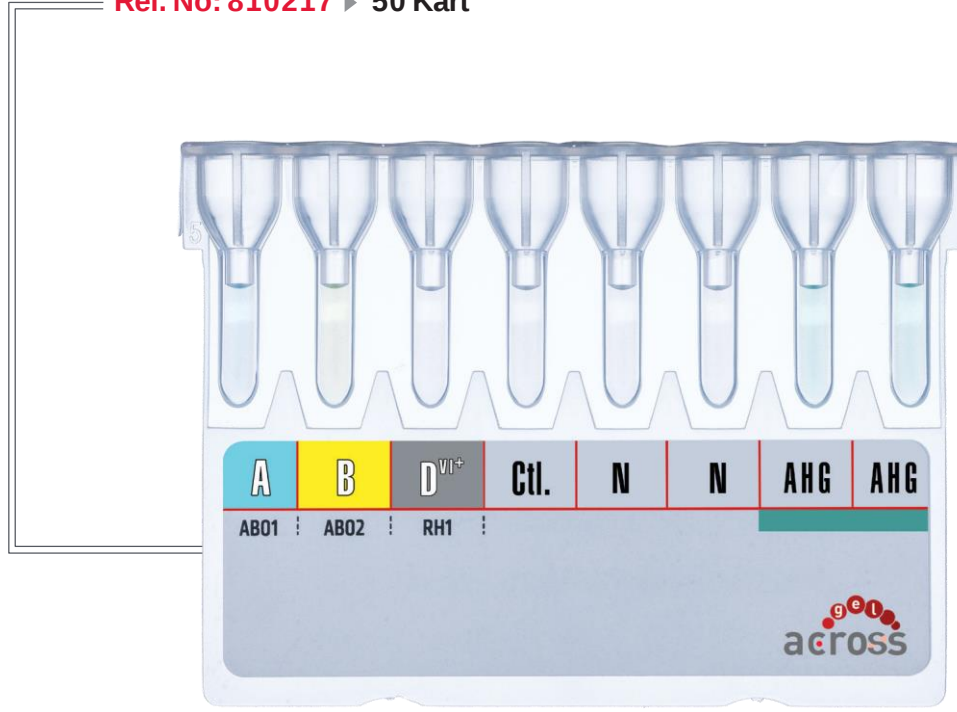

Across Gel® Cross Match

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- Transfüze edilecek olan kan ürünlerinin kabul edilen en uzun sürede canlılığını ve fonksiyonunu sürdürmesini sağlamak amacı ile,


- Alıcının eritrositlerinde herhangi bir yıkımın olmasını engellemek için eş zamanlı olarak alıcı ve vericinin ABO/Rh (D) kan grubu kontrolünü,
- Enzimli ve Coombs'lu ortamlarda major ve minor cross match (tam kan için) veya major cross match ile hastanın otoantikor testlerini (eritrosit süspansiyonu için) “Tek kart” üzerinde yapmanıza olanak sağlar.

Cross Match

**Ar-Ge'mizi ihtiyalarınıza
gre řekillendiriyoruz.**



Jel Santrifüstasyon Test Kartları

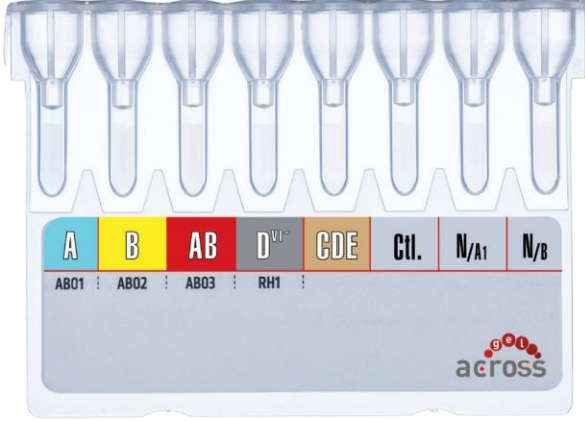


Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dv1-/CDE

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra C ve E antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810202 ▶ 50 Kart

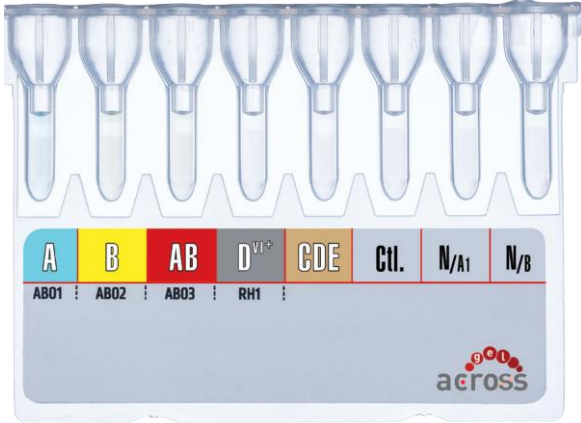


Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dv1+/CDE

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin yanı sıra C ve E antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810203 ▶ 50 Kart

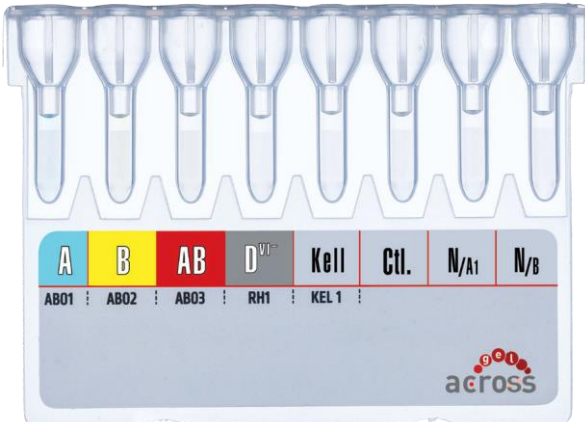


Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dv1-/Kell

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra Kell antijeninin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810204 ▶ 50 Kart

Jel Santrifüstasyon Test Kartları

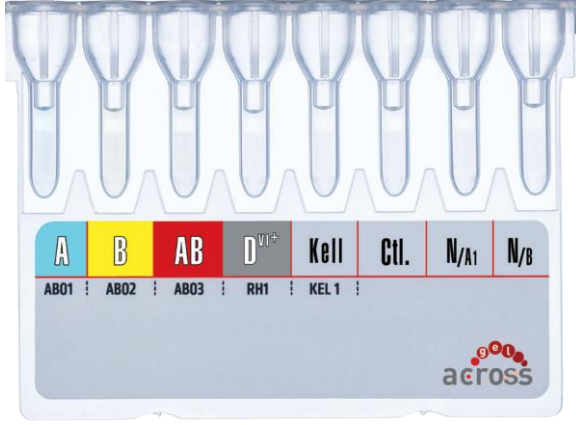


Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dv1+/Kell

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin yanı sıra Kell antijeninin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810205 ▶ 50 Kart

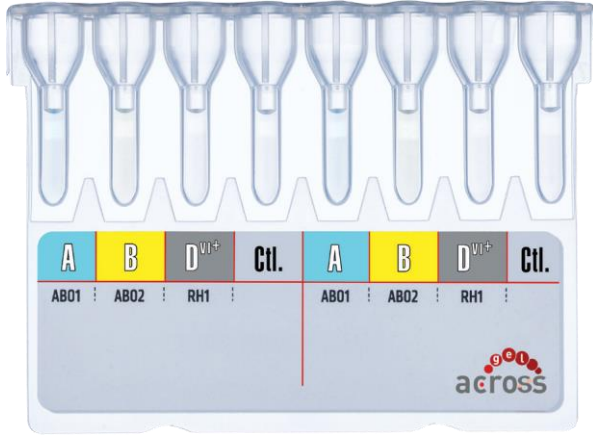


Across Gel®

Double ABO/Dv1+

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin varlığını kontrol edebilir. B ir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No:v 810206 ▶ 50 Kart

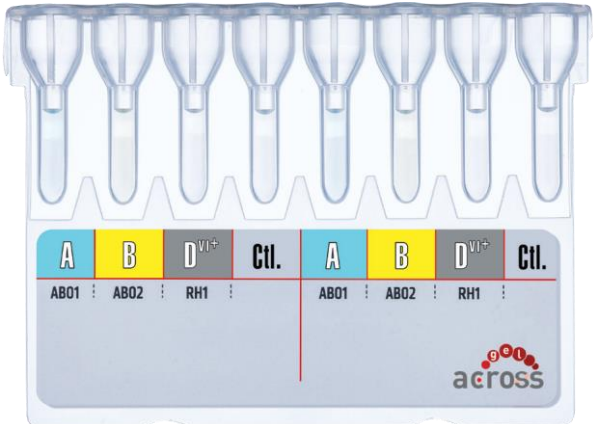


Across Gel®

Double ABO/Dv1-

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin varlığını kontrol edebilir. Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810207 ▶ 50 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

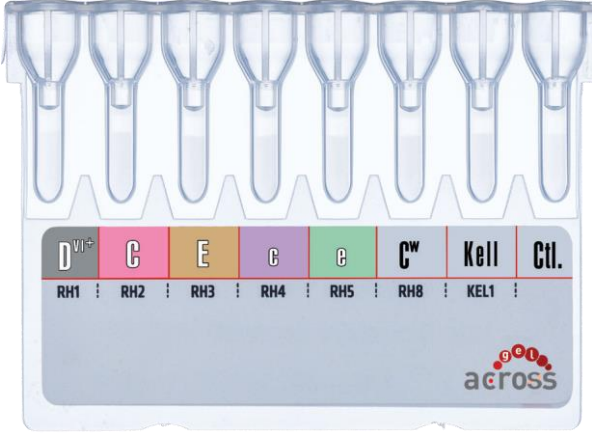


Across Gel®

Rh Phenotyping with Kell(K)

Rh ve Kell sistemi antijenlerini detaylı olarak tiplendirebilen, kontrol mikrotüpü ile hatalı sonuçları en aza indiren bu kart, sık transfüzyon uygulanan hastalara en uygun kanı kolayca bulmanıza olanak sağlamaktadır.

Ref. No: 810209 ► 50 Kart

Ref. No: 811209 ► 10 Kart

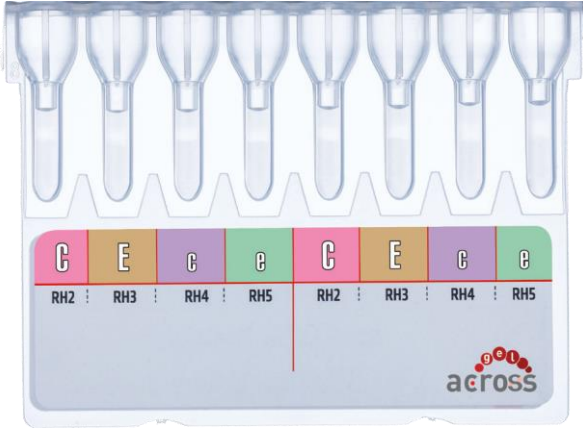

Across Gel®


Rh Phenotyping

Rh sistemindeki C, c, E, e antijenlerinin tespitine olanak sağlamaktadır.

Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810210 ► 50 Kart

Ref. No: 811210 ► 10 Kart

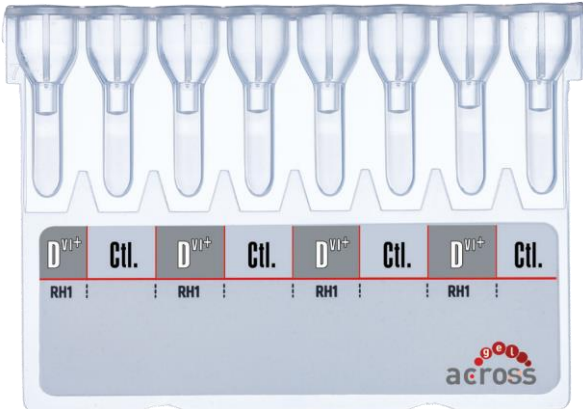

Across Gel®

Anti-DIVI+


İmmünizasyon riski yüksek olan Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin varlığını kontroledebilir.

Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810211 ► 50 Kart

Ref. No: 811211 ► 10 Kart

Jel Santrifüstasyon Test Kartları

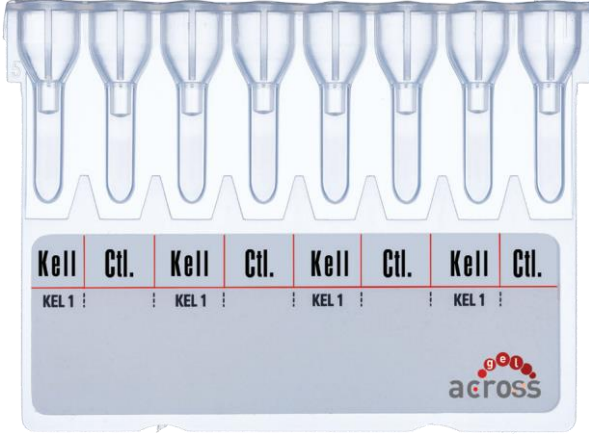


Across Gel®

Anti-Kell

Rh (D) antijeninden sonra antikor oluşturma riski en yüksek olan Kell antijenini tespit edebilmek için kullanılır. Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810212 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811212 ▶ 10 Kart

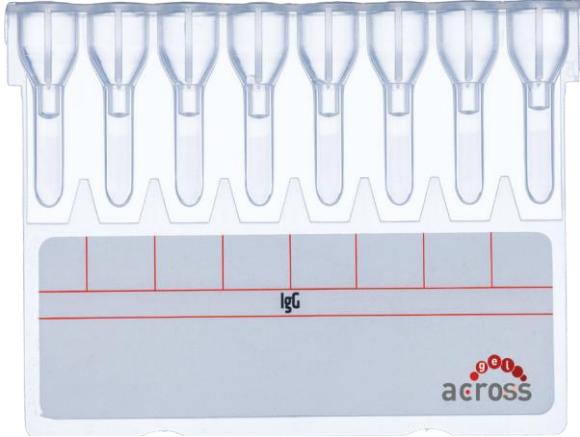


Across Gel®

Anti-IgG

Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde kullanılabilecek Monospesifik IgG reaktifli ortam sağlanmaktadır.

Ref. No: 810214 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811214 ▶ 10 Kart

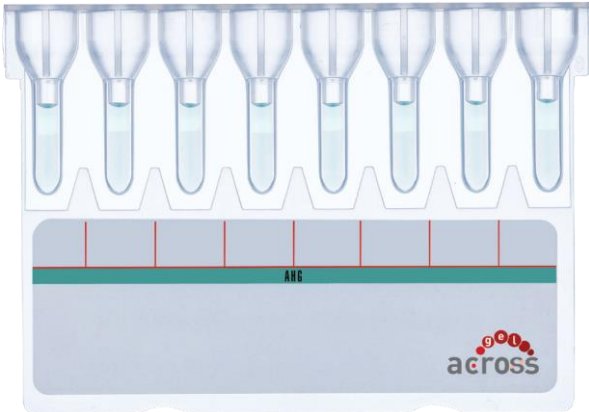

Across Gel®


AHG (IgG+C3d)

Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde kullanılabilecek Coombs reaktifli ortam sağlanmaktadır.

Ref. No: 810215 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811215 ▶ 10 Kart

Jel Santrifüstasyon Test Kartları

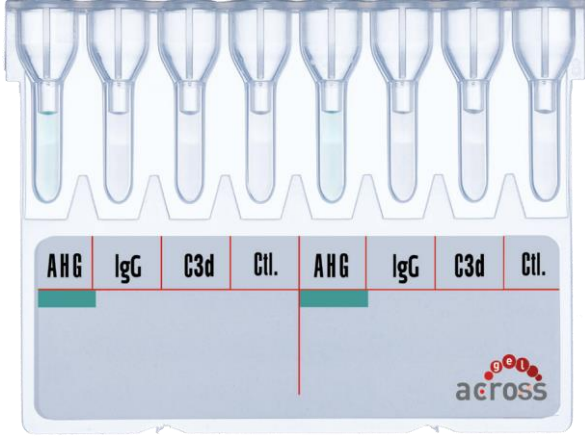


Across Gel®

Monospecific Direct Coombs (DAT)

Direkt Coombs testleri için Polispesifik AHG ile Monospesifik IgG ve C3d reaktifli ortamlar sağlamaktadır. Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810216 ► 50 Kart

Ref. No: 811216 ► 10 Kart

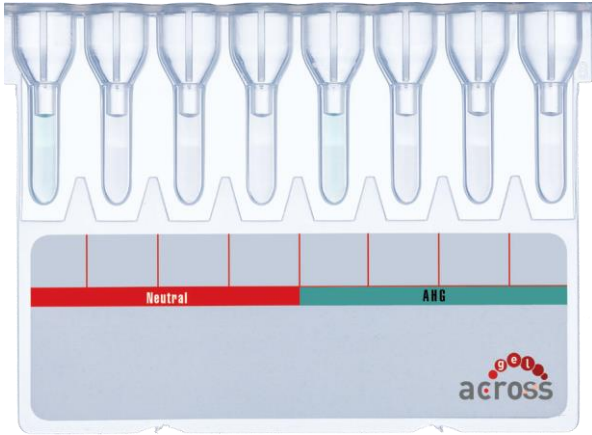


Across Gel®

Neutral/Coombs

Serum/plazmada bulunan oto ve allo antikorların Enzim ve Coombs yöntemleri ile tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ref. No: 810218 ► 50 Kart

Ref. No: 811218 ► 10 Kart

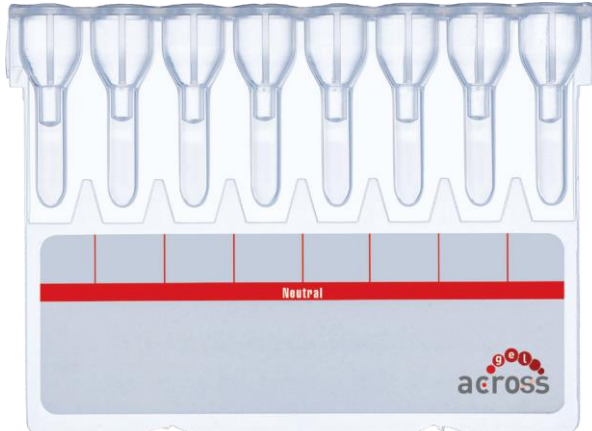


Across Gel®

Neutral

Reverse gruplama, Enzimli ortamda Antikor Tarama ve Tanımlama, Soğuk Aglutinin testi, isoaglutinin titresi ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirilmesi için kullanılabilecek Nötral mikrotüplerini içermektedir.

Ref. No: 810219 ► 50 Kart

Ref. No: 811219 ► 10 Kart

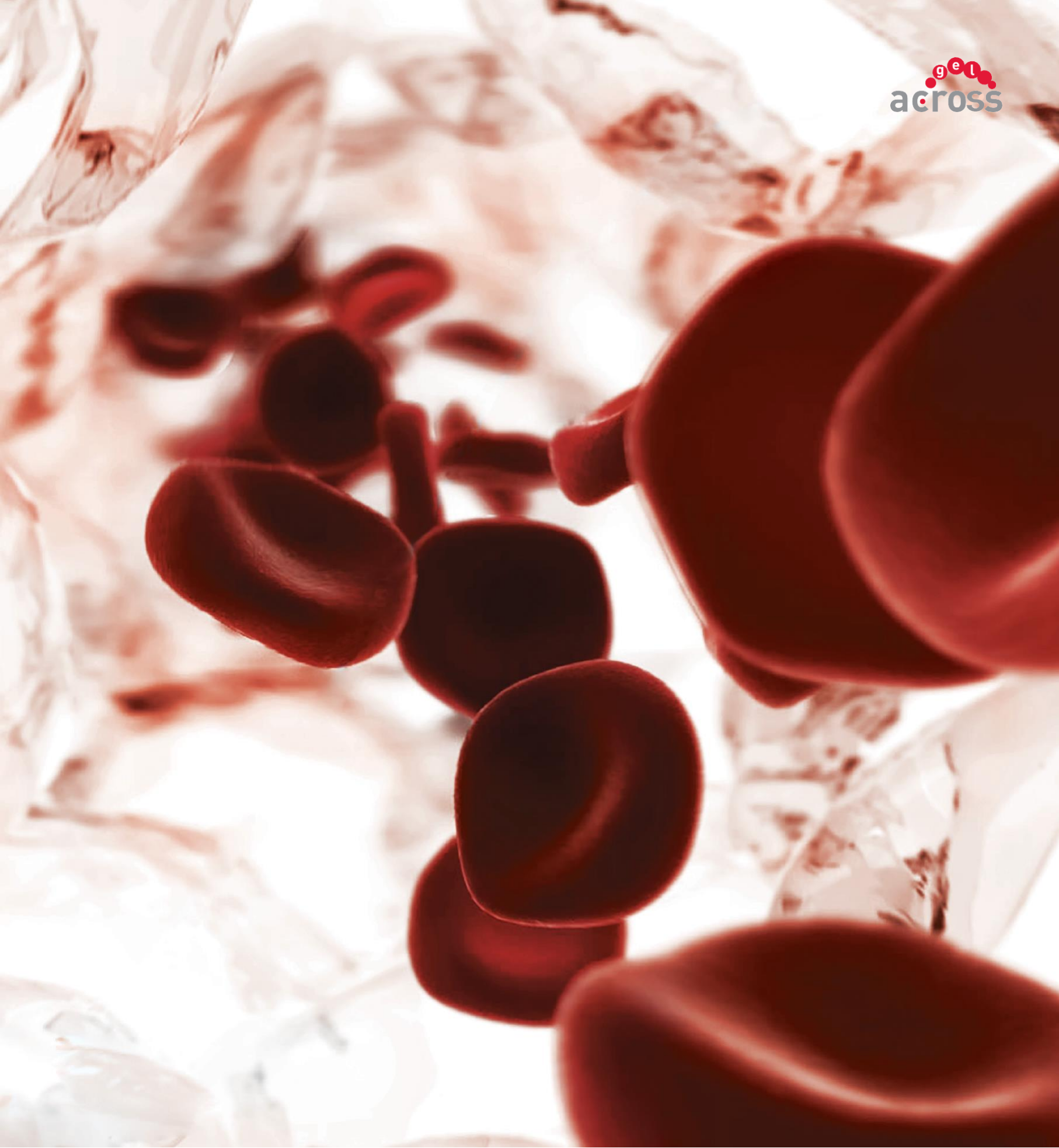

RBC H cre Setleri



Across Gel®

RBC A1/B

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglutininlerinin, varlıęı bilinen A1 ve B kırmızı kan h cre reaktifleri kullanılır.

Ref. No: 820101 ▶ 2 x 10 ml.



Across Gel®

RBC A1/A2/B/O

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglutininlerinin, varlıęı bilinen A1, A2, B ve O kırmızı kan h cre reaktifleri kullanılır.

Ref. No: 820102 ▶ 4 x 10 ml.



Across Gel®

Cell Screen 2

Across Screen Cell 2 h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820103 ▶ 2 x 10 ml.

RBC H cre Setleri



Across Gel  Cell Screen 2P

Across Screen Cell 2P h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820104   2 x 10 ml.



Across Gel  Screen Cell 3

Across Screen Cell 3 h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820111   3 x 10 ml.



Across Gel  Screen Cell 3P

Across Screen Cell 3P h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820112   3 x 10 ml.

RBC H cre Setleri



Across Gel®

Cell Screen 4

Across Screen Cell 4 h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820105 4 x 10 ml.



Across Gel®

Cell Screen 4P

Across Screen Cell 4P h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması i in kullanılır.

Ref. No: 820106 4 x 10 ml.




Across Gel®

Identi Cell

Across Identi Cell h cre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak  nemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda tanınlanması i in kullanılır.

Ref. No: 820107 11 x 5 ml.

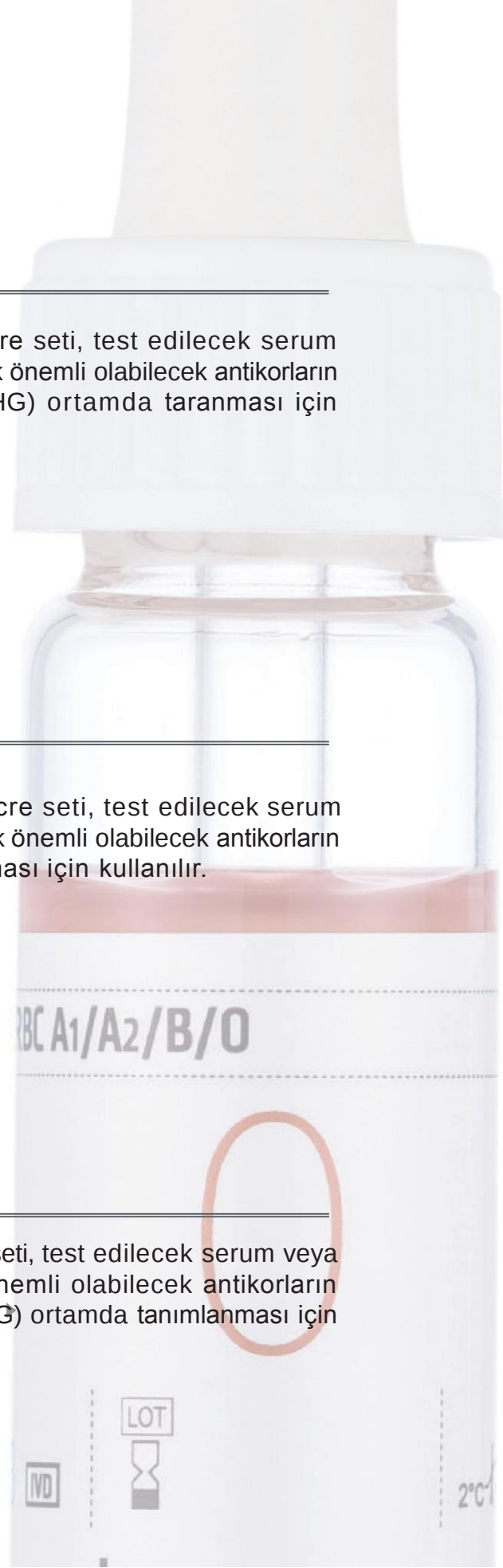

RBC HÜCRE SETLERİ

Across Gel® Identi Cell P

Across Identi Cell P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim'li ortamda tanımlanması için kullanılır.

Ref. No: 820108 11 x 5 ml.

Across Gel® RBC Coombs Control

Across RBC Coombs Control, içersinde anti-D ile sensitize edilmiş kırmızı kan hücreleri ile Coombs testlerinin kontrolü için kullanılır.

Ref. No: 820109 1 x 10 ml.

Across Gel® Quality Control

ABO / Rh (D) gruplandırması, Rh fenotipi ve K antijeninin saptanması ve düzensiz antikorların taranması ile kapsamlı kalite kontrolünde kullanılır.

İç kontroller, yerel ve ulusal kurallara uygun olarak düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Beklenen test sonuçları elde edildiğinde, test prosedürleri doğru bir şekilde uygulanıyor, reaktif ve ekipmanlar doğru sonuç veriyor demektir. Eğer beklenmeyen sonuçlar gözlenirse, hasta test sonuçları vermeyi durdurup, hatalı sonucun kaynağını tespit edebilirsiniz.

Ref. No: 820110 4 x 4 ml.

Yardımcı Solüsyonlar



Across Gel® LISS

Across LISS solüsyonu, Across Gel kartlarından kullanılacak olan eritrosit süspansiyonlarının hazırlanmasında kullanılır.

Ref. No: 830100 ► 100 ml.

Ref. No: 830500 ► 500 ml.



Across Gel® Bromeline

Across Bromelin solüsyonu, Across Gel Kartlarında Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk (Cross-Match) testleri için kullanılır.

Ref. No: 830400 ► 25 ml.

Ref. No: 830200 ► 100 ml.

Yardımcı Solüsyonlar



Across Gel® Wash A, B, O

“In vitro” diagnostik cihazlarının iç yıkaması için kullanılır.

- Ref. No: 830600 ► Wash A 500 ml.
- Ref. No: 830700 ► Wash B 500 ml.
- Ref. No: 830800 ► Wash O 500 ml.



Across Gel® Papaine

Across Papaine solüsyonu, Across Gel Kartlarında Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk (Cross-Match) testleri için kullanılır.

- Ref. No: 830300 ► 10 ml.

DiaPro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / HeadOffice

Fabrika /Factory

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: diapro@diapro.com.tr

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr



www.diapro.com.tr